

Patient Information Leaflet

Nisita[®]

Nasal Spray

Dear patient!

Please read the following patient information leaflet carefully, as it contains important information on using this medical device. If you have any questions, please consult your doctor or pharmacist.



What is contained in Nisita[®] Nasal Spray?

Each ml of nasal spray contains 3.3 mg of sodium chloride and 8.3 mg of sodium bicarbonate.

When is Nisita[®] Nasal Spray used?

Nisita[®] Nasal Spray generates a fine atomized spray and

- helps to relieve blocked nose, e.g. cold
- cleans and moistens the nasal mucosa, e.g. in the event of dry air
- loosens scabs and crusts.

Nisita[®] Nasal Spray is free from preservatives and suitable for adults, children and infants.

When may you not use Nisita[®] Nasal Spray?

There are no experiences speaking against an application.

What precautions are necessary when using Nisita[®] Nasal Spray?

When used correctly, there are no particular precautionary measures to be taken.

After nose operations or accidents however, a doctor should be consulted before using Nisita[®] Nasal Spray.

May Nisita[®] Nasal Spray be used during pregnancy or lactation?

There is no evidence available to suggest that the use of Nisita[®] Nasal Spray during pregnancy or lactation would be harmful.

How do you use Nisita[®] Nasal Spray?

If necessary, adults and children (from 2 years onwards) spray 1-2 times into each nostril several times daily, infants and children (up to the age of 2 years) spray once into each nostril several times daily.

Application:



Take down protective cap.

1. Push down the white actuator several times until the first puff is dispensed. Now the spray is ready for use for every further application.



2. Insert the spray nozzle into the nostril and apply the pump mechanism. In doing so, keep the bottle vertical and don't bend head backwards. During the spraying process breathe easily through the nose; then release the actuator slowly. Due to reasons of hygiene and to avoid infection, every bottle of Nisita[®] Nasal Spray should only be used by one person. After application, the spray nozzle should be wiped clean and the protective cap should be replaced on the bottle.

How long may you use Nisita[®] Nasal Spray?

Nisita[®] Nasal Spray may be used for a longer period of time if necessary. If symptoms do not improve after 14 days of treatment, please consult your doctor or pharmacist.

What undesirable side effects can Nisita[®] Nasal Spray have?

If used correctly, side effects are not to be expected.

What further information must be taken note of?

Nisita[®] Nasal Spray may only be used up to the expiry date printed on the box and label. After first opening, the bottle of Nisita[®] Nasal Spray should not be used for more than six weeks.

What pack sizes are available?

Packs of 20 ml solution.

Date of information: February 2008

Manufacturer

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Herzbergstr. 3, D-61138 Niederdorfelden,
Germany

 **Keep out of children's reach!**



Revised: 09/12; PB 1673002

نيسيتا

عزيزي المريض!

بخاخ للأنف

يرجى قراءة هذه النشرة بعناية حيث أنها تحتوي على معلومات هامة عن كيفية استخدام البخاخ. إذا كانت لديك أي إستفسارات يرجى إستشارة الطبيب أو الصيدلي

ما هي مكونات بخاخ الأنف نيسيتا؟

يحتوي كل مليلتر من البخاخ على 3.3 ملجم من كلوريد الصوديوم و 8.3 ملجم من بيكربونات الصوديوم

متى يستخدم بخاخ الأنف نيسيتا؟

يولد بخاخ الأنف نيسيتا رذاذ دقيق يساعد على:

- فتح الأنف المسدود مثل حالات البرد
- ينظف و يرطب الأغشية المخاطية في حالة الهواء الجاف
- يلين القشور الأنفية الجافة و المتبقية

لا يحتوي بخاخ الأنف نيسيتا على مواد حافظة وهو مناسب للكبار و الصغار والرضع.

ما هي موانع استخدام بخاخ الأنف نيسيتا؟

لا يوجد موانع استخدام مسجلة

ما هي الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام بخاخ الأنف نيسيتا؟

عند استخدام المستحضر بشكل سليم لا توجد أي إجراءات احتياطية معينه يجب إتخاذها. غير أنه بعد العمليات الجراحية في الأنف أو في حالة الحوادث التي تصيب الأنف يجب إستشارة الطبيب قبل استخدام بخاخ الأنف نيسيتا.


هل يمكن استخدام بخاخ الأنف نيسيتا خلال فترة الحمل أو الإرضاع؟

ليس هناك ما يثبت بأن استخدام بخاخ الأنف نيسيتا خلال فترة الحمل أو الإرضاع يسبب الأذى أو له أضرار.

كيف يستخدم بخاخ الأنف نيسيتا؟

عند الحاجة تكون الجرعة للكبار والصغار (سنتين فما فوق) بخه إلى بختين في كل فتحة للأنف عدة مرات في اليوم أما بالنسبة للرضع والأطفال حتى عمر سنتين تكون الجرعة بخه واحدة في كل فتحة للأنف عدة مرات في اليوم

الإستخدام

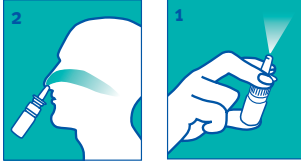

1. ارفع الغطاء الواقي ثم اضغط جهاز الدفع الأبيض إلى الأسفل عدة مرات إلى أن تخرج أول رشه عندها يكون البخاخ جاهز للإستخدام.

2. أدخل رأس البخاخ في فتحة الأنف واضغط على جهاز الدفع وخلال القيام بهذه العملية ابقِ العبوة بشكل عمودي ولا ترجع الرأس إلى الخلف وقم بالتنفس بشكل عادي من خلال الأنف ومن ثم أفلت جهاز الدفع ببطء. ولأسباب صحيه ومنعاً للعدوى يجب ألا يستخدم أكثر من شخص نفس العبوة وبعد الإستخدام يجب مسح رأس البخاخ وإعادة الغطاء الواقي مرة أخرى.

ما هي المدة التي تستطيع فيها استخدام بخاخ الأنف نيسيتا؟

يمكن استخدام بخاخ الأنف نيسيتا لفترة طويلة وإذا لم يطرأ تحسن بعد 14 يوم من استخدام المستحضر يرجى مراجعة الطبيب أو الصيدلاني.

ما هي الأعراض الجانبية الغير مرغوب بها التي قد يسببها استخدام بخاخ الأنف نيسيتا؟

عند الإستخدام بالشكل الصحيح، لا يتوقع ظهور أي أعراض جانبية

ما هي المعلومات الأخرى الواجب معرفتها؟

يجب عدم استخدام مرهم الأنف نيسيتا بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة ولا يجب استخدام بخاخ الأنف نيسيتا لمدة تزيد على 6 أسابيع من تاريخ أول استخدام.

ما هي العبوة المتوفرة؟

20 مليلتر

تاريخ معلومات هذه المعلومات: 2008/2

المصنع:

إينجلهارد أرنيميل جي أم بي إتش

هيرزبرجست 3 D-61138 نيدرورفيلدن،

ألمانيا



إحفظه بعيداً عن تناول الأطفال